

## Provetta Vacumed® doppia parete con Sodio Citrato

FL Medical si impegna a soddisfare i bisogni dei clienti, l'azienda si aggiorna continuamente per migliorare i prodotti e realizzare nuovi progetti. Alla base di questo nuovo prodotto ci sono i valori di FL Medical

**Innovazione**  
**Qualità**  
**Efficienza**

Le principali caratteristiche della provetta Vacumed® doppia parete con Sodio Citrato sono

### PROVETTA INTERNA

Materiale: Polipropilene  
Capacità: 1,8 ml o 2,7 ml

**Il Polipropilene permette un migliore mantenimento del sodio citrato garantendo il corretto rapporto tra sangue ed additivo nella provetta**

### PROVETTA ESTERNA


Dimensione: 13 x 75 mm  
Materiale: PET

**Il PET trattiene il vuoto assicurando il giusto equilibrio tra additivo e sangue**

### TAPPO

Dimensioni: 12 mm  
Materiale della protezione: Polipropilene  
Materiale del tappo: Gomma  
Colore: Azzurro

**Le principali particolarità del tappo sono il design perfetto e l'elevata qualità dei materiali utilizzati che garantiscono una perfetta ermeticità**

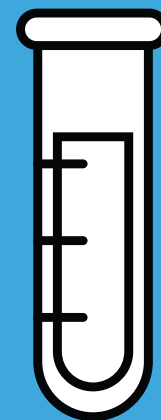

Codice	Sodio Citrato	Volume di aspirazione	Confezionamento
42450	3,2%	1,8 ml	100 pezzi per rack 1.200 pezzi per scatola
42451	3,2%	2,7 ml	100 pezzi per rack 1.200 pezzi per scatola
42490	3,8%	1,8 ml	100 pezzi per rack 1.200 pezzi per scatola
42491	3,8%	2,7 ml	100 pezzi per rack 1.200 pezzi per scatola